

FLOCKED SWABS™

nová generace odběrových tamponů

DispoLab

Odběrové tampony Flocked Swabs jsou vyráběny novou technologií nástřiku nylonových vláken v elektrostatickém poli. Nejedná se o námotek, jako u tradičních tamponů, ale o rovnoběžně orientovaná nylonová vlákna, která působí jako měkký kartáček a umožňují tak lepší odběr vzorků buněk.

Mikroorganismy i buňky při odběru neulpívají mezi vlákny námotku, ale jsou aktivně zachyceny elektrostatickou a kapilární silou.

Flocked tampon je revoluční odběrový koncept nabízející schopnosti, který tradiční odběrový tampon nemůže nabídnout.

Tradiční tampon
z námotku vláken



Nový tampon typu flocked swab
vlákna orientována rovnoběžně



Vzorek zůstává blízko povrchu
a umožňuje dokonalé vymytí.

Přednosti nových FLOCKED tamponů:

- **Anatomický a ergonomický design** - pro lepší komfort pacienta a účinnost při odběru vzorku
- **Lepší odběr vzorků** - sametový povrch tamponu rychle a účinně zachytí buňky
- **Rychlé automatické vymytí** - okamžité a spontánní uvolňování odebraného vzorku do tekutého média
- **Kvantitativní přenos vzorku** - dokonalý přenos vzorku od pacienta do transportní zkumavky


Optimální pro pacienta – maximální pro klinickou laboratoř

Tampony typu Flocked swab jsou dodávány v provedení:

Jednotlivě balené, sterilní:

Normální

obvyklá velikost tamponu,
délka tyčinky po zalomení 80 mm,
vhodný pro odběry z nosu, krku, rekta, vaginy, z rány nebo odběr stolice

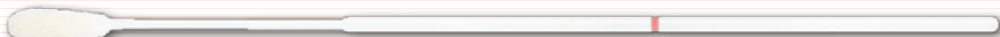

kat. č. 1642

Minitip

tampon malého průměru,
délka tyčinky po zalomení 80 mm,
vhodný pro odběr z malých či méně přístupných oblastí, jako jsou odběry z očí, uší, nosních průchodů, krku a urogenitálního traktu.
Vhodný pro dětské odběry.



kat. č. 1641

Nasofaryngeální flexibilní

tampon malého průměru,
pružná tyčinka po zalomení délky 100 mm,
vhodný pro odběr nasofaryngeálních vzorků a pro dětské odběry.



kat. č. 1643

Endocervikální drsný

drsný typ tamponu většího průměru,
tyčinka pevná, po zalomení délky 80 mm, především pro endocervikální odběry



kat. č. 1644

Endocervikální sametový

sametově jemný typ tamponu,
tyčinka pevná, po zalomení délky 80 mm, především pro endocervikální odběry



kat. č. 1645

Normální pro PCR

obvyklá velikost tamponu,
délka tyčinky po zalomení 30 mm,
vhodný pro běžné odběry.
Především pro metodiku PCR.



kat. č. 1646

Ve zkumavce, sterilní:

Minitip

tampon malého průměru ve zkumavce,
délka tyčinky po zalomení 80 mm,
vhodný pro odběr z uretry, případně z malých či méně přístupných oblastí, jako jsou odběry z očí, uší, nosních průchodů, krku.
Vhodný pro dětské odběry. Uzávěr zelený.



kat. č. 1647

Normální

obvyklá velikost tamponu ve zkumavce,
délka tyčinky po zalomení 80 mm, vhodný pro odběry z nosu, krku, rekta, vaginy, z rány nebo odběr stolice. Uzávěr červený.



kat. č. 1648

Nasofaryngeální flexibilní

tampon malého průměru ve zkumavce,
pružná tyčinka po zalomení délky 100 mm,
vhodný pro odběr nasofaryngeálních vzorků a pro dětské odběry. Uzávěr oranžový.



kat. č. 1649